



GoldCath®

**Hidrofilik
Üriner
Kateterler
ve Nelaton
Kateterler**

www.demersan.com.tr

CE 2292

ISO 9001:2008
ISO 13485:2012

Demersan
Biyoteknoloji İlalet Sanayi ve Tic. A.Ş.



GoldCath®

SONDA NEDİR?

Vücut içerisindeki boşluklardaki sıvıların dışarı tahliyelerinde kullanılan hortumsal yapıdaki esnek aletlerdir. Çok çeşitli yapıda olabilecekleri gibi çok farklı materyallerle de imal edilmiş olabilirler.

KATETER NEDİR?

Vücut boşluklarında kullanılan Sondalara verilen addır.

T.A.K. NEDİR?

Temiz Aralıklı Kateterizasyon ifadesinin kısaltılmış şeklidir.

HİDROFİLİK NEDİR?

Kateter kullanımında tahrişi önleyip kullanımı kolaylaştırmak amacı ile kateterin su ile kayganlaştırılmasını sağlayan bir kaplamadır.

HİJYEN ŞARTLARI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Vücut içi boşluklarına dışarıdan gönderilen apereylerin tatbikinde; gerek bu malzemelerin ve gerekse kullanıcıların elleri vasıtası ile zararlı mikroorganizmaların vücuda girişlerinin engellenmesi, kişinin hasta olmasının önlenmesi için gereklidir.

İ.Y.E. NEDİR?

İdrar Yolu Enfeksiyonları için kullanılan bir kısaltmadır.

TIBBİ GRADE NEDİR?

İnsan vücudu içine giren her türlü maddenin TIBBİ GRADE olarak standartları belirlenmiş ham maddelerden üretilmeleri

gerekmektedir. Malzemeyi ucuza mal edebilmek için, kullanılmış malzemelerin tekrar imalata hazırlayarak kullanılmaması ve imalatın belli şartlarının gereğini ifade eder. Tıbbi amaçlı üretilen her malzemenin ham maddesinin Tıbbi Grade saflığında olması gereklidir.

FTALAT NEDİR?

Ftalat yada Ftalat esterleri, plastik olarak nitelendirilen ürünlerde yumuşaklığın ve esnekliğin artırılması için kullanılırlar. Kanserojen olarak nitelendirilirler. Ftalat 'ın medikal ve bebek ürünlerde kullanımlarına 2009 yılında sınırlama getirilmiştir.

NEDEN GoldCath® KATETER?

- Yaşam standardını yükseltmek amacı ile tasarlanmış ve tıbbi grade ham maddeleri ile üretilmiştir. Gerek nelaton kateter ve gerekse hidrofilik kaplamanın üretimi safhalarında ftalat kullanılmadan formüle edilen biyoteknoloji ürünü bir üriner kateterdir.
- Kılıflı kateter uygulaması ile; kateterizasyon esnasında oluşabilecek enfeksiyon risklerini minimuma indirir.
- Kateter ucu travma riskini en aza indiren kesintisiz oval yapıdadır.
- Kateterin boşalma delikleri her ölçü (size) için optimal deşarjlı temin edecek ölçülerde planlanmıştır.
- Aşırı derecede idrar biriktirmeden kullanmaya özen gösteriniz.



GoldCath® Plus


- Tek kullanımlıktır.
- İlave suya ihtiyaç yoktur.
- 45 saniyede hazır olur.
- Kateterizasyon süresince kayganlığını korur.
- Yuvarlatılmış ucu sayesinde travmaları engeller.
- Pratik ve hafiftir.
- Gün boyu limitsiz konfor sağlar.
- Ftalat içermez.
- Bükülmeyi ve travmayı önleyen uygun sertlik.
- Kılıf vasıtasıyla el değmeden kullanılması ile enfeksiyon riski en aza indirilmiştir.

1




Ellerinizi yıkayınız.

4

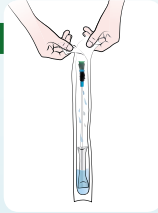

Konnektör tarafından tutarak paketi açınız.

2

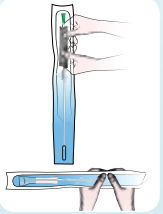

Su soketini resimlerden birine uygun olarak patlatınız.

5



Paketi kullanarak kılıfın ucundaki mavi yüzüğü tutunuz. Sondayı paketten çıkarırken kılıfıda sonda ucuna doğru çekiniz.

3



Su soketini patlattıktan sonra sondanın kayganlığını sağlamak için suyu paket içerisinde 45 saniye çalkalayınız.

6



Sonda üzerindeki kılıfı kullanarak kateteri el değmeden tatbik ediniz.

Tüm idrar torbalarına uygun konnektör

Kontaminasyonu önleyen, kolay hareket edebilen silikon kılıf

Kolay Tutma için Silikon Yüzük

Medikal PVC

Hidrofilik Kaplama

Yuvarlatılmış Atravmatik Uç

Pürüzsüz Drenaj Delikleri



GoldCath®


- Tek kullanımlıktır.
- İlave suya ihtiyaç yoktur.
- 45 saniyede hazır olur.
- Kateterizasyon süresince kayganlığını korur.
- Yuvarlatılmış ucu sayesinde travmaları engeller.
- Pratik ve hafiftir.
- Gün boyu limitsiz konfor sağlar.
- Ftalat içermez.
- Bükülmeyi ve travmayı önleyen uygun sertlik.
- Yüzük vasıtasıyla el değmeden kullanılması ile enfeksiyon riski en aza indirilmiştir.

1




Ellerinizi yıkayınız.

4

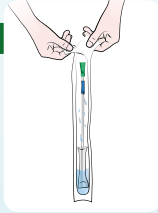


Konnektör tarafından tutarak paketi açınız.

2

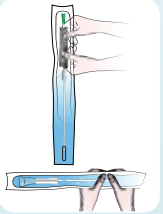


Su soketini resimlerden birine uygun olarak patlatınız.

5

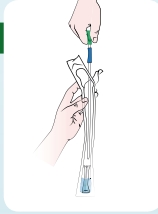


Kateteri paketinden çıkarınız. Eğer gereklyse, paketin üzerindeki çift taraflı bantı kullanarak paketi kuru bir zemine yapıştırabilirsiniz.

3

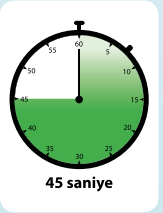

Su soketini patlattıktan sonra sondanın kayganlığını sağlamak için suyu paket içerisinde 45 saniye çalkalayınız.

6

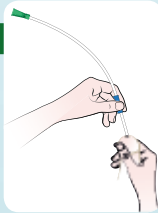

Sonda üzerindeki yüzüğü kullanarak kateteri el değmeden tatbik ediniz.

Tüm idrar torbalarına uygun konnektör

Kolay Tutma için Silikon Yüzük

Medikal PVC

Hidrofilik Kaplama

Yuvarlatılmış Atravmatik Uç

Pürüzsüz Drenaj Delikleri



GoldCath® Kit


- Tek kullanımlıktır.
- Hasta konforunu en üst seviyede sağlamak amacıyla, idrar toplama torbası ve hidrofilik üriner kateter tek bir üründe kombine edilmiştir.
- Ftalat içermez.
- Yumuşak ve esnek PVC'den imal edilmiştir.
- Pratik ve hafiftir.

1




Ellerinizi yıkayınız.

5

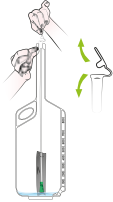

Torbanın ucundaki tıpayı açınız.

2

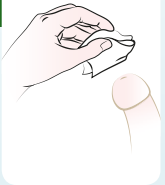


Paketten çıkan savlonlu mendil ile genital bölgeyi temizleyiniz.

6




Kateteri torbanın ucundan tutup diğer elinizle konnektörün arkasından iterek çıkarınız ve el değmeden üretraya uygulayınız.

3

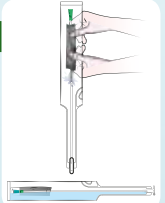

Su soketini resimde gösterilen şekilde bükmeden iki elle sıkarak patlatınız.

7

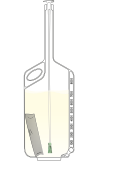


İşlem bittikten sonra kateteri torba içine tümüyle iterek torba ucundaki tıpayı kapatınız.

4



Su soketini patlattıktan sonra sondanın kayganlığını sağlamak için suyu paket içerisinde 45 saniye çalkalayınız.

8

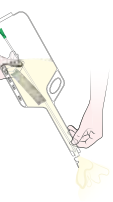

Torba içeri boşaltmak için torba ucundaki tıpayı açıp boşaltınız. Torbayı çöpe atınız.





GoldCath® Dilatasyon


- Tek kullanımlıktır.
- İlave suya ihtiyaç yoktur.
- 45 saniyede hazır olur.
- Dilatasyon süresince kayganlığını korur.
- Yuvarlatılmış ucu sayesinde travmaları engeller.
- Pratik ve hafiftir.
- Ftalat içermez.
- Bükülmeyi ve travmayı önleyen uygun sertlik.
- Yüzük uzantısıyla el değmeden kullanılması il enfeksiyon riski en aza indirilmiştir.

1




Ellerinizi yıkayınız.

4

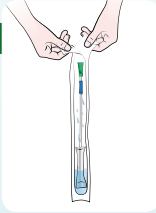


Konnektör tarafından tutarak paketi açınız.

2

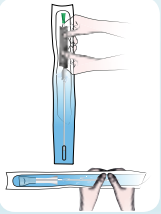


Su soketini resimlerden birine uygun olarak patlatınız.

5

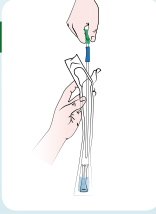


Kateteri paketten çıkarınız. Eğer gerekirse, paketin üzerindeki çift taraflı bantı kullanarak paketi kuru bir zemine yapıştırabilirsiniz.

3

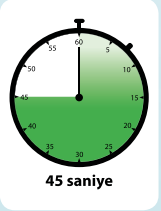

Su soketini patlattıktan sonra sondanın kayganlığını sağlamak için suyu paket içerisinde 45 saniye çalkalayınız.

6

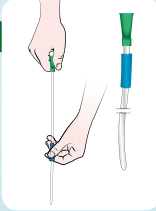

Sonda üzerindeki yüzüğü kullanarak kateteri el değmeden tatbik ediniz.

Tüm idrar torbalarına uygun konnektör

Kolay Tutma için Silikon Yüzük

Medikal PVC

Hidrofilik Kaplama

Yuvarlatılmış Atravmatik Uç



GoldCath® Nelaton


- Tek kullanımlıktır.
- Yuvarlatılmış ucu sayesinde travmaları engeller.
- Giriş kolaylığı sağlayan yüzey.
- Çapraz iki yan delik.
- Pratik ve hafiftir.
- Ftalat içermez.
- Etilen Oksit (EO) ile steril edilmiştir.
- Bükülmeyi ve travmayı önleyen uygun sertlik.

1




Ellerinizi yıkayınız.

3

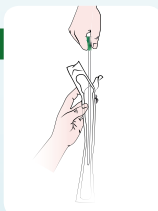


Sondayı konnektör kısmından tutarak paketten çıkarınız.

2

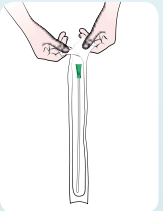

Konnektör tarafından tutarak paketi açınız.

4

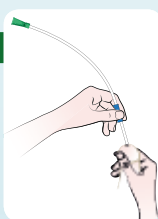

Sondayı uygun bir şekilde tatbik ediniz.

Tüm idrar torbalarına uygun konnektör

Medikal PVC

Yuvarlatılmış
Atravmatik Uç

Pürüzsüz
Drenaj
Delikleri



GoldCath®

Ürün Teknik Bilgiler			GKF GoldCath® Plus (Kılıflı)			GYU GoldCath® (Yüzüklü)			GKT GoldCath® Kit	GDL GoldCath® Dilatasyon	GN GoldCath® Nelaton		
CH/FR	Renk	Hortum Çapı	Erkek (Male)	Kadın (Female)	Çocuk (Pediatric)	Erkek (Male)	Kadın (Female)	Çocuk (Pediatric)	Erkek (Male)	Erkek (Male)	Erkek (Male)	Kadın (Female)	Çocuk (Pediatric)
CH 06		2,00 mm	06-40 cm	06-20 cm	06-30 cm	06-40 cm	06-20 cm	06-30 cm	06-40 cm	06-40 cm	06-40 cm	06-20 cm	06-30 cm
CH 08		2,67 mm	08-40 cm	08-20 cm	08-30 cm	08-40 cm	08-20 cm	08-30 cm	08-40 cm	08-40 cm	08-40 cm	08-20 cm	08-30 cm
CH 10		3,33 mm	10-40 cm	10-20 cm	10-30 cm	10-40 cm	10-20 cm	10-30 cm	10-40 cm	10-40 cm	10-40 cm	10-20 cm	10-30 cm
CH 12		4,00 mm	12-40 cm	12-20 cm	-	12-40 cm	12-20 cm	-	12-40 cm	12-40 cm	12-40 cm	12-20 cm	-
CH 14		4,67 mm	14-40 cm	14-20 cm	-	14-40 cm	14-20 cm	-	14-40 cm	14-40 cm	14-40 cm	14-20 cm	-
CH 16		5,33 mm	16-40 cm	16-20 cm	-	16-40 cm	16-20 cm	-	16-40 cm	16-40 cm	16-40 cm	16-20 cm	-
CH 18		6,00 mm	18-40 cm	18-20 cm	-	18-40 cm	18-20 cm	-	18-40 cm	18-40 cm	18-40 cm	18-20 cm	-