

Goldpad[®]

Anjio Ped

**Pressure Assisted Dressing
(NON - ALLERGIC)**

KULLANIM KILAVUZU **DIRECTION FOR USE**

CE



Patent (Patent) No:
TR 2007 05213 Y

Tescil (Registration) No:
2007 03949

DEMERSAN

Biyoteknoloji İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Batı Sitesi Mah. Gersan San. Sit. Tahsin Kahraman Cad. No:92 Yenimahalle / ANKARA

Tel: +90 312 255 08 86 (pbx) | Fax: +90 312 255 08 26 | demersan@demersan.com.tr

www.demersan.com.tr

Goldpad®

Anjio Ped

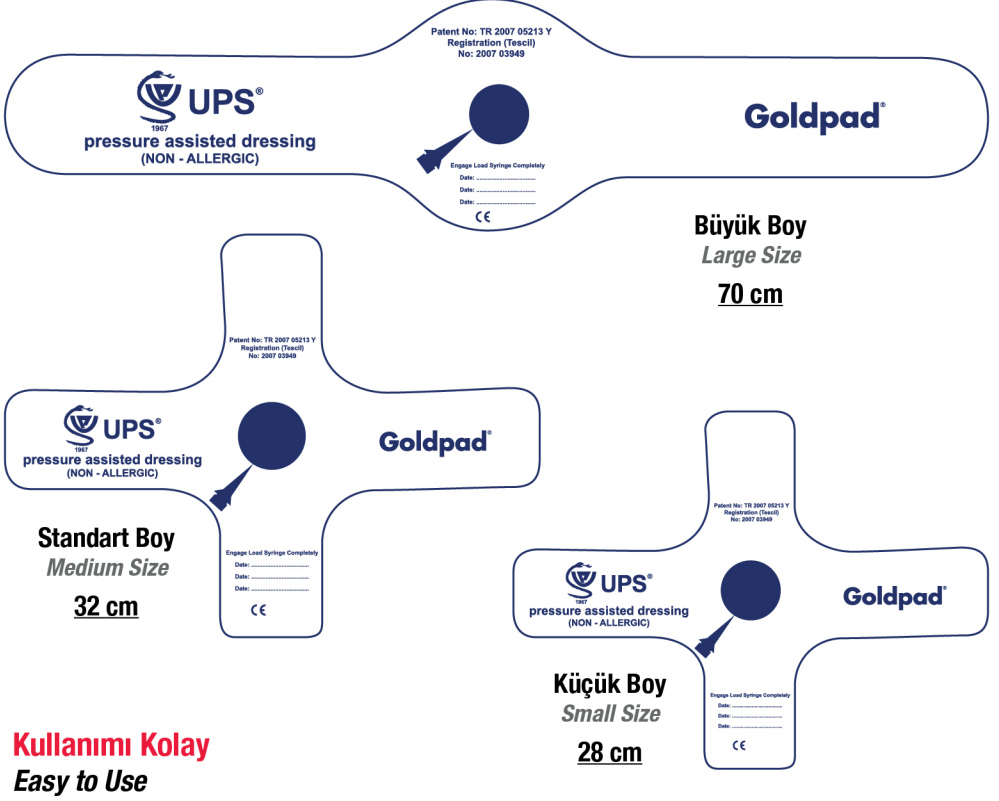

Goldpad'i Uygula
Apply Goldpad



Balonu Şişir
Inflate Bulb



Sıkıştır
Compress



İndir
Deflate

Kullanım bilgisine bakınız.
Refer to instructions for use.

GERÇEK BASINÇ

Goldpad, uygun hızlı basınç uyumu ve uygun aktif sıkılaştırmayı mümkün kılar. Hastanın iyileşme dönemiyle birlikte pozisyon aldığı ve kalktığı zaman bölgeye sabit basınç uygular. Komplikasyon olmayan hastalar için bölge yönetim kontrolü uygular. Malzemeyi çıkartmadan, temiz pence-resinden bölgeye müdahale etme olanağı sağlar. Bölgeyi kontaminasyon korumak adına steril el-bise olarak kullanılabilir.


Goldpad 28 cm Balon Basıncı

Hava Basıncı	Ortalama Güç	Maksimum Güç	Minimum Güç
0	0.12 lbs	0.24 lbs	0.09 lbs
20	4.89 lbs	6.93 lbs	0.74 lbs
30	11.59 lbs	14.85 lbs	8.83 lbs
40	18.74 lbs	22.55 lbs	15.20 lbs

GERÇEK KONFOR

Goldpad hasta için konforludur. El basıncıyla hemostasis oluşumu olduğunda bölgede sabit basınç uygular. Kliniksel çalışmalarda, geçmişte kateterizasyon prosedürü uygulanmış hastaların %87'si Goldpad'in daha önce uygulanan prosedürlerden daha rahat olduğunu belirtmişlerdir. Goldpad, insan anatomisine bakmaksızın, şişirilirken hastaya yapışmaktadır.

Goldpad Manuel Yardım Tekniği Hasta Konforu vs. Önceki

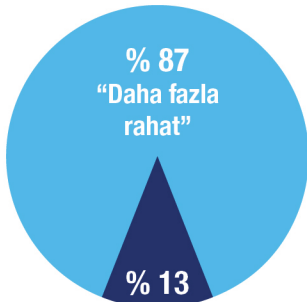

"Biraz daha rahat" veya "Aynı"

REAL PRESSURE

Goldpad delivers adjustable active compression and enables immediate pressure adjustment. Maintains consistent pressure on the site during patient recovery as well as patient positioning and transport. Provides site management control for non-compliant patient. Facilitates site assessment through the clear window without removing the device. Can be used as sterile dressing to protect the site from contamination.


Goldpad 28 cm Bulb Pressure

Air Pressure	Average Power	Maximum Power	Minimum Power
0	0.12 lbs	0.24 lbs	0.09 lbs
20	4.89 lbs	6.93 lbs	0.74 lbs
30	11.59 lbs	14.85 lbs	8.83 lbs
40	18.74 lbs	22.55 lbs	15.20 lbs

REAL COMFORT

Goldpad is comfortable for the patient. Maintains consistent pressure on the site when obtaining hemostasis. In the clinical study, 87% of the patient who had undergone a catheterisation procedure in the past indicated that Goldpad with MAT was "much more comfortable" than any previous procedure. Goldpad adheres to the patient while inflated regardless of patient anatomy.

Goldpad Manual Assist Technique (MAT) Patient Comfort vs. Previous

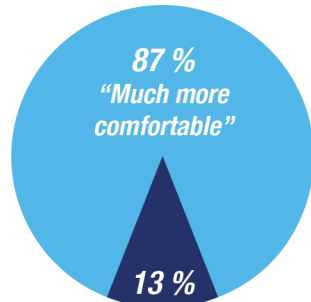

"Somewhat more comfortable" or "Same"

GOLDPAD YAPABİLECEKKEN, NEDEN BASINÇ TUTULUR?

Hemostasisin uygulanması ve korunmasında, Goldpad'ın yardımcı olmasına izin verin. Klinik çalışmaları, Goldpad'in diagnostik ve girişimsel takibindeki femoral arter kanüllüzyasyonunda 28 cm'de aktif basınç zamanını azaltmasında rahat ve etkili olduğunu belirtmişlerdir. Goldpad, erişilen bölgenin önce ve sonra hemostazisinde yönetimi kolaylaştırır. Personel ihtiyacını azaltır, değerli kaynakları maksimum düzeye çıkarır, hasta rahatını sağlar.

Goldpad 28 cm aktif sıkıştırma zamanını azaltır.

- Diagnostik Durumda: Minimum 5 dakika aktif sıkıştırma zamanı
- Girişimsel Durumlar: Minimum 10 dakika aktif sıkıştırma zamanı

Düşük komplikasyon oranı

- Goldpad manuel sıkıştırma düşük ortalama komplikasyonuna sahiptir.

	Diagnostik	Girişimsel
Aktif Sıkıştırma Zamanı	5 dk	10 dk
Pasif Sıkıştırma Zamanı	120 dk	240 dk
Toplam Sıkıştırma Zamanı	125 dk	250 dk

Toplam Majör Komplikasyon Oranı	
Goldpad Hastası	% 1
Manuel Sıkıştırma	% 2.4

WHY HOLD PRESSURE WHEN GOLDPAD CAN?

Let Goldpad assist you in obtaining and maintaining hemostasis. The clinical studies demonstrate that Goldpad 28cm is safe and effective in reducing active compression time in femoral artery cannulation following diagnostic and interventional procedures. Goldpad simplifies pre- and post- hemostasis management of the access site. It reduces demands on the staff, maximizes valuable resources and enhances patient comfort.

Goldpad 28 cm reduces active compression time.

- Diagnostic Case: 5 minute minimum active compression time
- Interventional Cases: 10 minute minimum active compression time

Low complication rate

- Goldpad has a lower mean complication rate vs. manual compression.

	Diagnostic	Interventional
Active Compression Time	5 min	10 min
Passive Compression Time	120 min	240 min
Total Compression Time	125 min	250 min

Total Major Complication Rate	
Goldpad Patient	1 %
Manual Compression	2.4 %

Türkiye Distribütörü / Distributor

Demersan Biyoteknoloji İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Batı Sitesi Mah. Gersan San. Sit. Tahsin Kahraman Cad. No:92 Yenimahalle / ANKARA

Tel: +90 312 255 08 86 (pbx) | Fax: +90 312 255 08 26 | demersan@demersan.com.tr | www.demersan.com.tr

Üretici Firma / Manufacturer

UPS İlaç Tıbbi Malzeme ve Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Konya Yolu Mevlana Bulvarı No:168 06520 Balgat / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 286 72 27-28 | Fax: +90 312 286 72 92 | info@upsilac.com | www.upsilac.com

