

Primacath®

Primacath®

Yüzüklü
Hidrofilik
Üriner
Kateter

Ürün Teknik Bilgiler			PYU GoldCath® (Yüzüklü)		
CH/FR	Renk	Hortum Çapı	Erkek (Male)	Kadın (Female)	Çocuk (Pediatric)
CH 06		2,00 mm	06-40 cm	06-20 cm	06-30 cm
CH 08		2,67 mm	08-40 cm	08-20 cm	08-30 cm
CH 10		3,33 mm	10-40 cm	10-20 cm	10-30 cm
CH 12		4,00 mm	12-40 cm	12-20 cm	-
CH 14		4,67 mm	14-40 cm	14-20 cm	-
CH 16		5,33 mm	16-40 cm	16-20 cm	-
CH 18		6,00 mm	18-40 cm	18-20 cm	-

Tüm idrar torbalarına
uygun konnektör

Kolay Tutma için
Silikon Yüzük

Medikal PVC
Hidrofilik Kaplama
Yuvarlatılmış
Atravmatik Uç
Pürüzsüz
Drenaj
Delikleri

DEMERSAN

www.demersan.com.tr

Batısitesi Mahallesi Gersan Sanayi Sitesi Tahsin Kahraman Caddesi
No:90 Ergazi - Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 255 08 86 (pbx) | Fax: 0312 255 08 26
demersan@demersan.com.tr | www.demersan.com.tr

CE 2292

ISO 9001:2008
ISO 13485:2012

CE 2292

ISO 9001:2008
ISO 13485:2012

DEMERSAN

www.demersan.com.tr

Primacath®

Primacath®

SONDA NEDİR?

Vücut içerisindeki boşluklardaki sıvıların dışarı tahliyelerinde kullanılan hortumsal yapıdaki esnek aletlerdir. Çok çeşitli yapıda olabilecekleri gibi çok farklı materyallerle de imal edilmiş olabilirler.

KATETER NEDİR?

Vücut boşluklarında kullanılan Sondalara verilen addır.

T.A.K. NEDİR?

Temiz Aralıklı Kateterizasyon ifadesinin kısaltılmış şeklidir.

HİDROFİLİK NEDİR?

Kateter kullanımında tahrişi önleyip kullanımı kolaylaştırmak amacı ile kateterin su ile kayganlaştırılmasını sağlayan bir kaplamadır.

HİJYEN ŞARTLARI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Vücut içi boşluklarına dışarıdan gönderilen apereylerin tatbikinde; gerek bu malzemelerin ve gerekse kullanıcıların elleri vasıtası ile zararlı mikroorganizmaların vücuda girişlerinin engellenmesi, kişinin hasta olmasının önlenmesi için gereklidir.

İ.Y.E. NEDİR?

İdrar Yolu Enfeksiyonları için kullanılan bir kısaltmadır.

TIBBİ GRADE NEDİR?

İnsan vücudu içine giren her türlü maddenin TIBBİ GRADE olarak standartları belirlenmiş ham maddelerden üretilmeleri

gerekmektedir. Malzemeyi ucuza mal edebilmek için, kullanılmış malzemelerin tekrar imalata hazırlayarak kullanılmaması ve imalatın belli şartlarının gereğini ifade eder. Tıbbi amaçlı üretilen her malzemenin ham maddesinin Tıbbi Grade saflığında olması gereklidir.


FTALAT NEDİR?

Ftalat yada Ftalat esterleri, plastik olarak nitelendirilen ürünlerde yumuşaklığın ve esnekliğin artırılması için kullanılırlar. Kanserojen olarak nitelendirilirler. Ftalat 'ın medikal ve bebek ürünlerde kullanımlarına 2009 yılında sınırlama getirilmiştir.

NEDEN Primacath KATETER?

- Yaşam standardını yükseltmek amacı ile tasarlanmış ve tıbbi grade ham maddeleri ile üretilmiştir. Gerek nelaton kateter ve gerekse hidrofilik kaplamanın üretimi safhalarında ftalat kullanılmadan formüle edilen biyoteknoloji ürünü bir üriner kateterdir.
- Kılıflı kateter uygulaması ile; kateterizasyon esnasında oluşabilecek enfeksiyon risklerini minimuma indirir.
- Kateter ucu travma riskini en aza indiren kesintisiz oval yapıdadır.
- Kateterin boşalma delikleri her ölçü (size) için optimal deşarjlı temin edecek ölçülerde planlanmıştır.
- Aşırı derecede idrar biriktirmeden kullanmaya özen gösteriniz.

- Tek kullanımlıktır.
- İlave suya ihtiyaç yoktur.
- 45 saniyede hazır olur.
- Kateterizasyon süresince kayganlığını korur.
- Yuvarlatılmış ucu sayesinde travmaları engeller.
- Pratik ve hafiftir.
- Gün boyu limitsiz konfor sağlar.
- Ftalat içermez.
- Bükülmeyi ve travmayı önleyen uygun sertlik.
- Yüzük vasıtasıyla el değmeden kullanılması ile enfeksiyon riski en aza indirilmiştir.

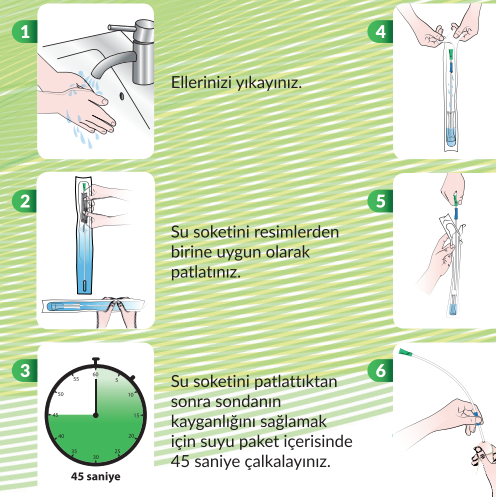

Tüm idrar torbalarına uygun konektör

Kolay Tutma için Silikon Yüzük

Medikal PVC

Hidrofilik Kaplama

Yuvarlatılmış Atravmatik Uç

Pürüzsüz Drenaj Delikleri

Sonda üzerindeki yüzüğü kullanarak kateteri el değmeden tatbik ediniz.